

Autoclave

a Baja Temperatura


MD-J.T 



WWW.EQUIPOSMEDICOS.COM.CO

Tecnología

Avanzada

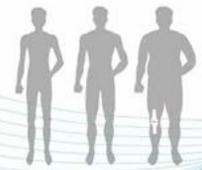

- ✓ Control PLC, pantalla táctil, interfaz hombre-máquina, unidad de almacenamiento, interfaz amigable.
- ✓ El esterilizador de peróxido de hidrógeno se inyecta de manera adecuada con una tasa de inyección ajustable, lo que reduce el costo bajo la garantía del efecto de esterilización.
- ✓ Puede esterilizar eficazmente para lentes de acero inoxidable con diámetro interior ≤ 1 mm, longitud ≤ 500 mm y manguera PTFE con diámetro interno > 1 mm, longitud ≤ 2000 m para garantizar el efecto de esterilización.
- ✓ Puerta automática, con diseño de protección de rayos infrarrojo le da una mayor seguridad al operador.
- ✓ Amigable con el medio ambiente
- ✓ La función de detección automática puede monitorear de manera oportuna el proceso de esterilización; si es anormal, el sistema emitirá automáticamente una alarma y mostrará el motivo de la falla en la pantalla
- ✓ Todas las partes centrales, como la bomba de vacío, la válvula electromagnética, el dispositivo de medición y el filtro de aire, son componentes de alto rendimiento.
- ✓ El equipo de purificación del peróxido de hidrógeno puede aumentar la concentración de peróxido de hidrógeno de manera efectiva y mejorar el efecto de esterilización..



Principales parámetros

- ✓ Tensión de alimentación: 220 V, trifásica
- ✓ Frecuencia: 60Hz
- ✓ Material de la cámara de esterilización: aluminio
- ✓ Material de la carcasa: ABS + Q235
- ✓ Temperatura ambiente: 5 °C ~40 °C
- ✓ Humedad ambiental: 30% ~95% sin condensación
- ✓ Temperatura de la cámara de esterilización en funcionamiento: 35 °C ~55 °C
- ✓ Presión atmosférica en funcionamiento: 700hPa ~1060hPa

Especificaciones según capacidad

Modelo	MD-J.T-120L	MD-J.T-200L
Volumen total	135L	220L
Capacidad de carga o volumen útil	120L	200L
Puerta	Puerta única	OPCIONAL DOBLE PURETA
Tipo de Cámara	Rectangular	Rectangular
Dimensiones de la Cámara (WXHxD)	450x450x600 mm	500x500x800mm
Dimensiones externas	800x1050x1730 mm	860x1100x1790 mm
Peso Neto	490 Kg	620 kg
Fuente de alimentación	220Vac	220Vac
Tiempo de esterilización	Ciclo corto: 31 minutos Ciclo estándar: 48 minutos	Ciclo corto: 25 minutos Ciclo estándar: 35 minutos
Capacidad de Cargas para cada casete	Ciclo corto: 12 veces, Ciclo estándar: 6 veces	Ciclo corto: 12 veces, Ciclo estándar: 6 veces
Presentación estándar	No incluye Incubadora. No incluye: Interruptor de apertura en los pies	No incluye Incubadora. No incluye: Interruptor de apertura en los pies
Presentación avanzada	Incubadora incorporada, Interruptor de apertura en los pies	Incubadora incorporada, y con interruptor de apertura en los pies
Frecuencia	60Hz	60Hz
Potencia	≤3600VA	4200VA

Autoclave MD-J-T



WWW.EQUIPOMEDICOS.COM.CO